

liteLIME LIMS

Labor-Information-Management-System

Zur Selbstinstallation

Telefonsupport für 6 Monate ab Lieferung

Konfiguration

Client - Server - Lösung
für beschränkte Anzahl von Mitarbeitern

Betriebssystem für Arbeitsplätze: Win98SE - WinXP,
Server ab Windows XP Home (gemäß Microsoft)

kostengünstig
verwendet Microsoft Express 2008 SQL Server
(kostenlos gemäß Lizenzbedingungen Microsoft)

Individuelle Anpassung
Frei konfigurierbare Felder
über Konfigurationstabellen
keinerlei Änderung des Sourcecodes notwendig

Investitionsschutz über Jahre
Anpassung an neue Gegebenheiten

Benutzeroberfläche

Oberfläche individuell dem jeweiligen
Arbeitsplatz anpassbar

Deutsche Benutzerführung und Hilfe

Zugriff auf verschiedensten
Berechtigungsebenen

Integriertes automatisches
Benachrichtigungssystem über
Versionänderung von Dokumenten
Statusänderungen von
Aufträgen und Proben

Integration

Schnittstellen zu Microsoft Excel, Word und
anderen Programmen

Labor-Information-Management-System

Produktivitätssteigerung

Zeitersparnis ab der ersten Probe

Datenübernahme
Automatisch oder im Dialog

Vollautomatischer Ausdruck von
Analysenberichten
Statistiken und Aufstellungen

Verwendung von Standardvorlagen

Qualitätsverbesserung

Vermeiden von Eingabefehlern

Alle QS relevanten Anwenderaktionen
nachvollziehbar (Audit Log)

Automatische Sicherstellung der
Anwender-Berechtigungen nach QS

Höchste Sicherheit gegen Datenverlust

Flexibilität durch Anpassung

Universell: für den Betriebsalltag entwickelt
Individuell: kann durch Systemadministrator an
Kundenwünsche angepasst werden

Upgrademöglichkeit auf uniLIME und q/Lime und damit
individuelle Änderungen und Anpassungen
Upgrademöglichkeit auf andere Datenbanken

uniLIME LIMS und QS für
Auftragslabors, Forschung und Entwicklung

q/LIME Lims und QS für
Industrie, Produktion, Forschung und Entwicklung

Advanced Technical Software

Dr. Schuster
Zippererstraße 15
1110 Wien
AUSTRIA

email: labor@ats-vienna.com
web: www.ats-vienna.com

Tel: (+43 1) 815 66 75
Fax: (+43 1) 815 66 75 9


Advanced Technical Software / **ATS**



Zeitersparnis
ufriedenheit


liteLIME LIMS

... wozu selbst programmieren?

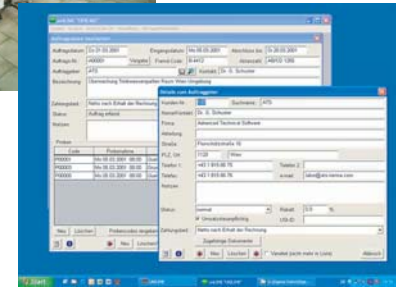

liteLIME LIMS und **QS**
für **kleinste Labors**

Advanced Technical Software / **ATS**

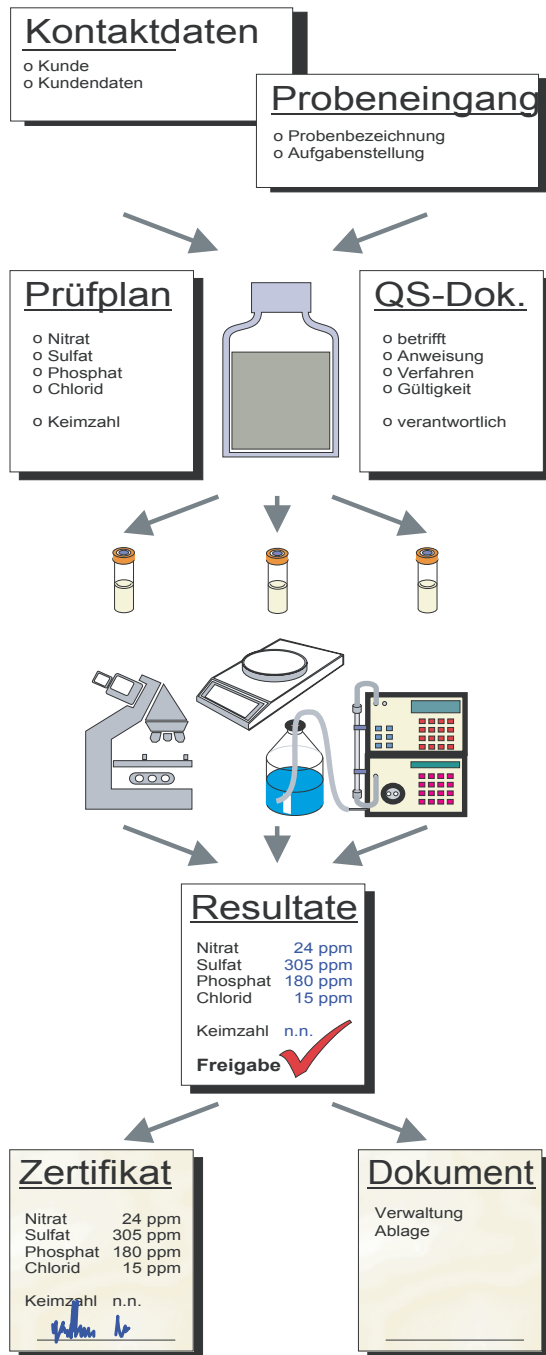

liteLIME Probenlauf

Probeneingang im Labor

Prüfpläne, Parameter, Methoden Spezifikationen und Grenzwerte durch Vorlagen festgelegt oder frei definierbar
Erstellung von Arbeitslisten
Drucken von Etiketten und Barcode
Verteilung der Proben

Messung

Direkte Übernahme der Messwerte von Laborgeräten
Eingabe der Analyseergebnisse im Dialog numerisch oder als Text

Kontrolle und Freigabe der Ergebnisse

Automatische Prüfung von Grenzwerten
Überprüfung und Freigabe durch Berechtigte
Automatische Messwertumrechnung
Eingabe von Gutachten und Beurteilungen

Abschluss - Bericht

Automatische Erstellung der Analysenberichte in Word, Excel oder als pdf-File
Export zur weiteren Verarbeitung

Automatische Archivierung der Daten

Sekundenschnelles Auffinden von alten Daten, Berichten, ...

liteLIME Management

Probenverwaltung

Probenahme - Planung
Verwaltung von Rückstellmustern, Produkten und Spezifikationen

Dokumentenablage

beliebige Bild-, Text- und andere Dokumente bei den dazugehörigen Aufträgen, Proben und Ergebnissen einbinden

Kunden- und Lieferantendatenbank

Verwaltung von Adressen-spezifischen Daten
Aufträgen
Analysenberichten